



**Медицина. Инновации.
Стремление.**



DC Medicine - официальный дистрибьютор продукции **VOGT MEDICAL** GERMAN QUALITY. SINCE 1991

Компания Vogt Medical Vertrieb GmbH (VM) была основана в 1991 году Михаэлем Фогтом. Центральный офис компании располагается в г. Карлсруэ, Германия. Более чем 20-ти летний опыт успешной работы на международном рынке изделий медицинского назначения и расходных материалов.

Основная продукция:

Медицинские расходные материалы – маски, катетеры, мочеприемники, иглы, шприцы и другие.

Комплексный подход

Компания предлагает структурные решения на основе комплексного подхода: готовые решения - от концептуального планирования и консультаций, включая финансирование и реализацию проекта, поставки медицинского расходного материала, до обучения и контроля персонала.

Надежность

Компания работает на международном уровне и имеет многолетний опыт в дистрибуции одноразовых медицинских изделий.

Инновации

Vogt Medical Vertrieb GmbH постоянно разрабатывает новые технологии с одной целью: предложить пациентам и медицинским работникам больше безопасности.

Клиентоориентированность

Философия Vogt Medical Vertrieb GmbH основана на двух столпах: продуктовой философии и клиентской философии. Продуктовая философия заключается в стремлении предлагать клиентам высококачественные надежные продукты по доступной цене.


VM® ИНЪЕКЦИОННЫЕ ИГЛЫ

Одноразовые инъекционные иглы используются для:

- инъекций
- внутрикожных проб
- забора крови
- разведения медикаментов


Стенка:

- (1) стандартная
- (2) тонкая

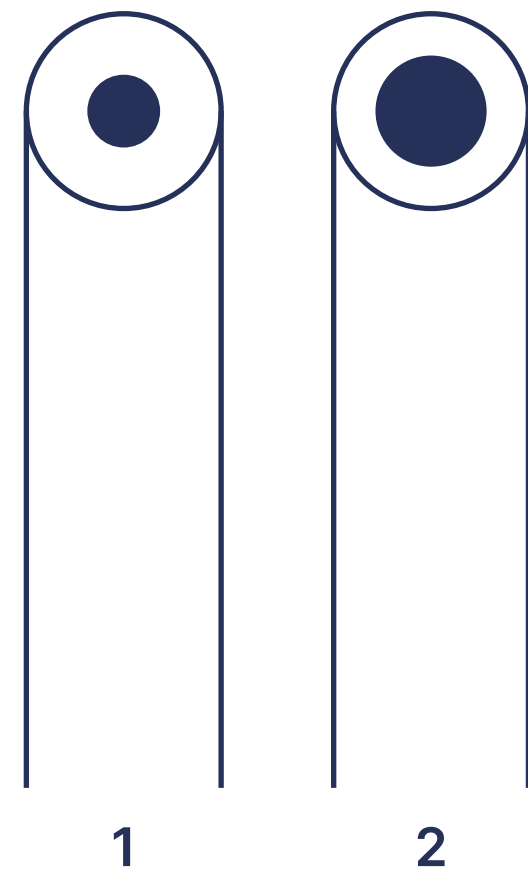


Срез:

- (3) стандартный
- (4) короткий
- (5) внутрикожный

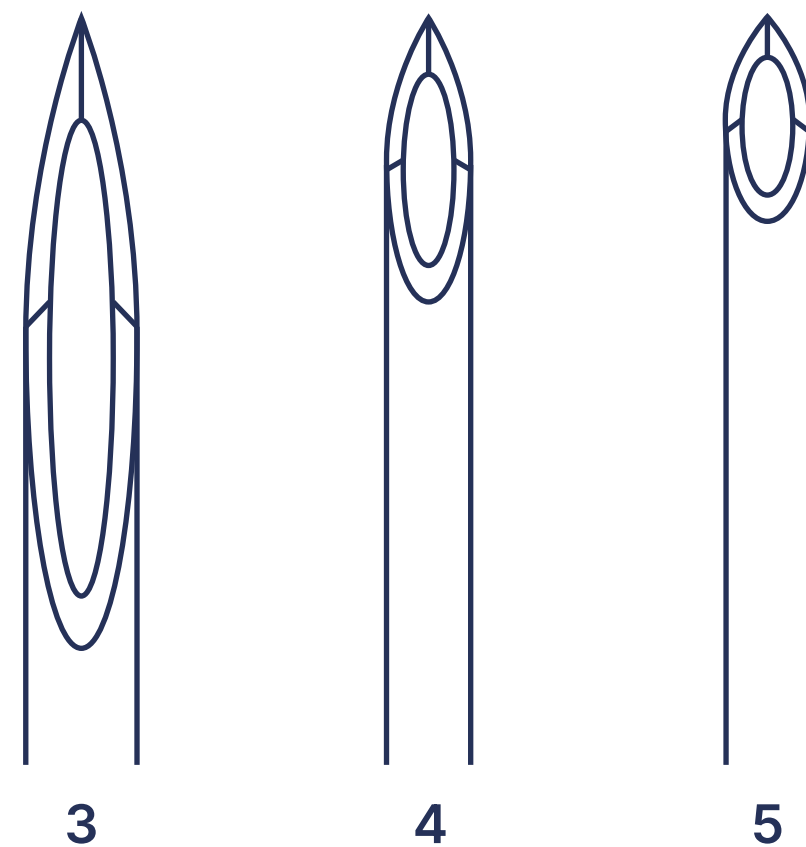

КОМПОНЕНТЫ ИГЛЫ:

- (6) головка иглы
- (7) соединительная деталь
- (8) трубка иглы
- (9) предохранительный колпачок

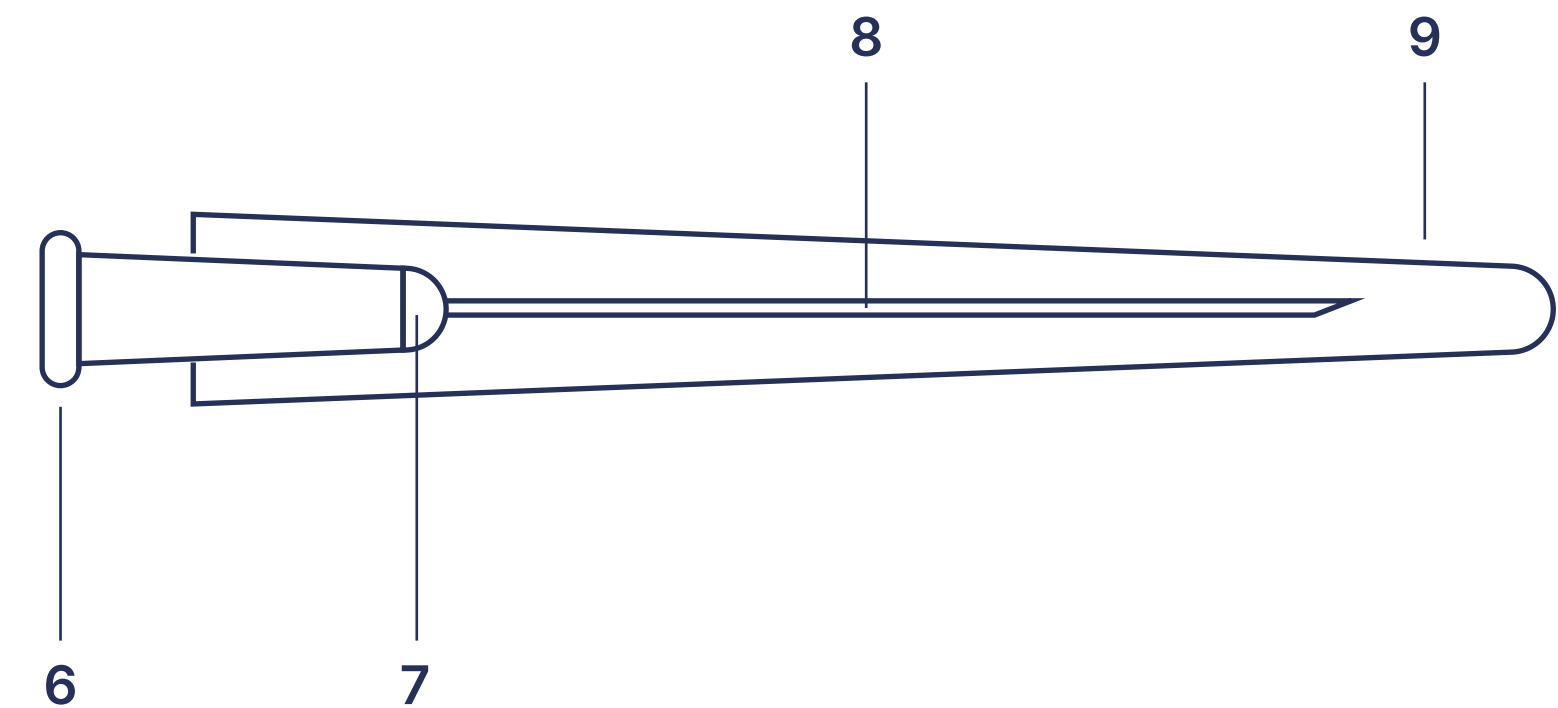

Цветовая кодировка ISO:



ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

**Подходят к шприцам с коннектором
как Луер Слип, так и Луер Лок**

Универсальная головка иглы

**Простота подбора иглы
под определенную манипуляцию**

Цветовая кодировка согласно ISO,
разнообразные срезы, ассортимент длин иглы,
варианты толщины сеток

**Минимальное воздействие на ткани
и скорейшее заживление**

Трехгранная заточка острия, отшлифованные
и отполированные стенки иглы

Легкое и плавное введение иглы

Специальная смазка из силиконового масла

**Увеличенная скорость потока даже
вязких препаратов**

Возможна при использовании
тонкостенной иглы

VM® 2-Х КОМПОНЕНТНЫЕ ШПРИЦЫ

2-х компонентный шприц используется для введения лекарственных препаратов.

2-х компонентный шприц состоит из:

- (1) цилиндра
- (2) шток-поршня



Коннектор Луер Слип:

- (3) Эксцентрический (сбоку цилиндра шприца):
для внутривенных инъекций
- (4) Концентрический (по центру цилиндра шприца):
для внутримышечных и подкожных инъекций



ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

**Не требует дополнительных усилий
при надевании иглы**

Простой и удобный коннектор Луер Слип

**Беспрепятственный контроль дозировки
и ведения препаратов**

Максимально прозрачный цилиндр шприца
с хорошо читаемой, нестираемой
маркировкой

**Оптимален для введения
агрессивных растворов**

Отсутствие резины в комплектации шприца
позволяет избежать нежелательных реакций

Удобство подбора шприца

В зависимости от места манипуляции (подкожные
и внутримышечные или внутривенные инъекции)
выбирается нужная вариация коннектора

Отсутствие аллергии

Безлатексная технология изготовления



VM® 3-Х КОМПОНЕНТНЫЕ ШПРИЦЫ

3-х компонентный шприц используется для введения лекарственных препаратов.

3-х компонентный шприц состоит из:


- (1) цилиндра
- (2) уплотнителя поршня
- (3) шток-поршня

Коннектор:

- (4) Луер Лок
- (5) Луер Слип:
 - а) концентрический;
 - б) эксцентрический

Возможная комплектация:

- без инъекционной иглы
- с приложенной инъекционной иглой
- с надетой инъекционной иглой
- №10 с надетой иглой

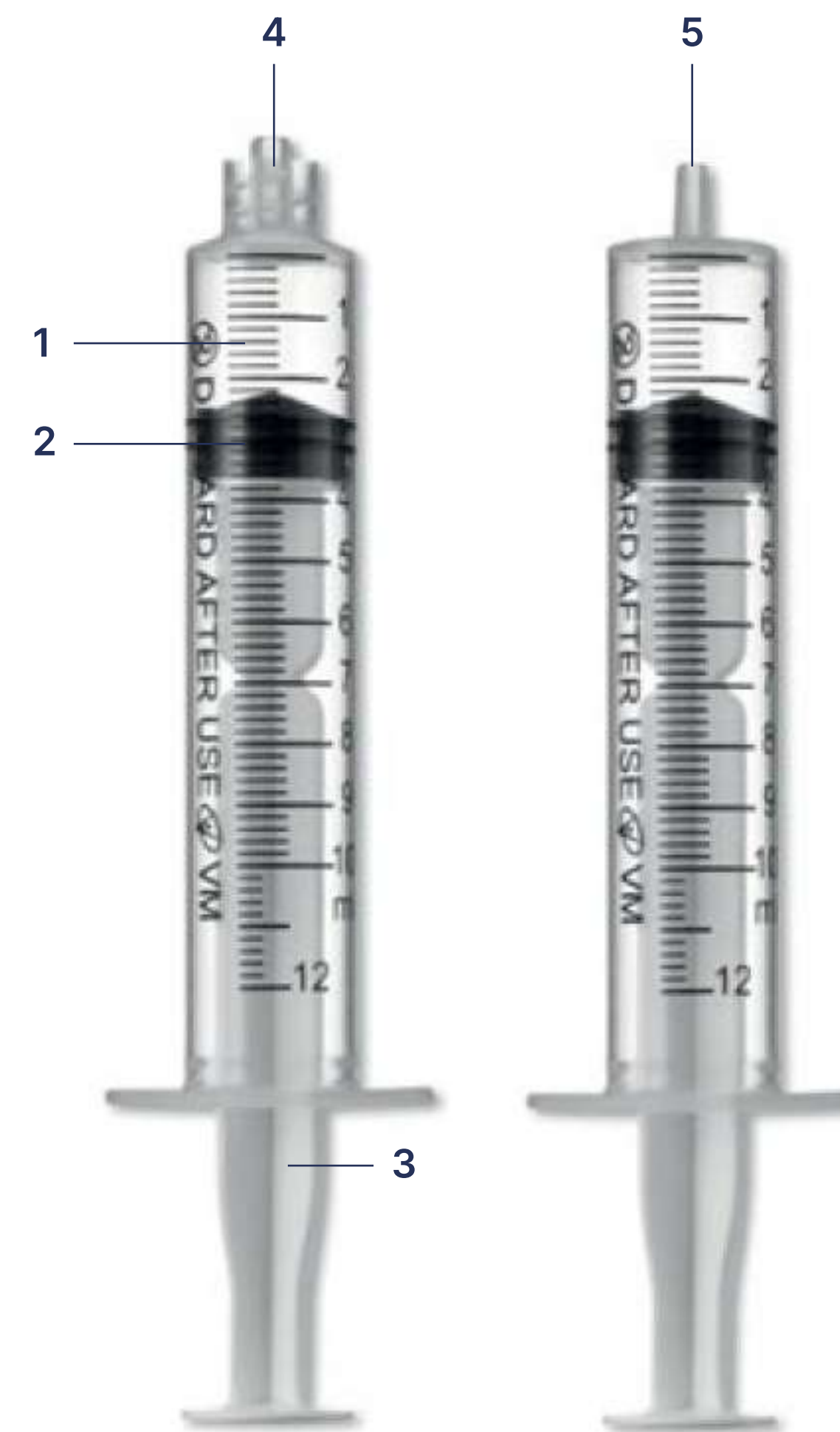

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Возможность вводить вязкие препараты

Надежный винтовой коннектор Луер Лок

Отсутствие обратного хода лекарства во время инъекции

Два кольца уплотнителя поршня гарантируют герметичность

Возможность смешивать перед введением препараты с нестандартной дозировкой

Большинство шприцов имеют дополнительный объем

Удобство подбора шприца

В зависимости от места манипуляции (подкожные и внутримышечные или внутривенные инъекции) выбирается нужная вариация коннектора

Беспрепятственный контроль дозировки и введения препаратов

Максимально прозрачный цилиндр шприца с хорошо читаемой, нестираемой маркировкой

Плавное введение препарата, снижение дискомфорта

Точная совместимость уплотнителя поршня и цилиндра, одновременно с идеально гладкой внутренней поверхностью цилиндра

Удобство реализации шприцов №10

- ✓ нет ошибок учета при продаже
- ✓ сохранность при транспортировке и удобство хранения в домашней аптечке
- ✓ отсутствие ошибок использования
- четкая маркировка
- качественная упаковка
- понятная инструкция со схемами



VM® ШПРИЦЫ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Шприцы большого объема: 50(60) / 100 / 120 / 150 мл –
3-х компонентные многоцелевые шприцы для применения
в урологии, гастроэнтерологии, травматологии, ортопедии,
интенсивной терапии и других направлениях:

- аспирация содержимого из полостей
- энтеральное питание через зонд
- промывание / дренаж и т.д.

Коннектор:

(1) Катетерный тип (2) Луер Лок (3) Луер Слип эксцентрический



ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Удобство проведения манипуляций с большим объемом препарата

Широкий ассортимент включает:
50(60) / 100 / 120 / 150 мл

Удобство забора препаратов из флакона

Наличие переходника Луер Слип в шприцах с катетерным наконечником

Удобство промывания полосных катетеров

Наличие наконечника катетерного типа

Удобство подключения к зондам

Наконечник катетерного типа совместим со всеми типами и размерами зондов и полостных катетеров

Возможность вводить вязкие препараты

Надежный винтовой коннектор Луер Лок

Удобный захват штока-поршня

Упорное кольцо штока (на некоторых моделях)

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Плавное введение препарата, снижение дискомфорта

Точная совместимость уплотнителя поршня и цилиндра одновременно с идеально гладкой внутренней поверхностью цилиндра

Отсутствие обратного хода лекарства во время инъекции

Два кольца уплотнителя поршня гарантируют герметичность

Отсутствие аллергии

Безлатексная технология производства

Сохранение химических свойств светочувствительных препаратов

Шприц №1410305 - из специально окрашенного пластика, задерживающего солнечные лучи в УФ-диапазоне

VM® ШПРИЦЫ ДЛЯ ПЕРФУЗИОННОЙ ПОМПЫ

3-х компонентный шприц изготовлен по стандарту ISO 7886-2 и предназначен для внутривенных введений сильнодействующих лекарственных препаратов посредством инфузионных насосов (шприцевых насосов).



Возможные модели:

- полностью прозрачный
- светозащитный

* Компания Vogt Medical не производит инфузионные/шприцевые насосы

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Может использоваться со всеми известными марками инфузионных насосов

Изготовлен согласно стандарту ISO 7886-2

Безопасное введение препаратов при давлении ≤ 3 бар

Наличие универсального коннектора Луер Лок с надежным винтовым креплением

Увеличение срока службы шприцевого насоса

Легкость хода шприца уменьшает нагрузку на привод

Отсутствие обратного хода лекарства

Два кольца уплотнителя поршня гарантируют герметичность

Отсутствие аллергии

Безлатексная технология производства

Удобство наблюдения за инфузией, независимо от доступности обзора цилиндра

Наличие дополнительной шкалы градуировки на штоке

Плавное введение препарата, снижение дискомфорта


Точная совместимость уплотнителя поршня и цилиндра одновременно с идеально гладкой внутренней поверхностью цилиндра

Сохранение химических свойств светочувствительных препаратов

В ассортименте есть шприц из специально окрашенного пластика, задерживающего солнечные лучи в УФ-диапазоне

VM® ИНСУЛИНОВЫЕ ШПРИЦЫ

Инсулиновый шприц – 3-х компонентный шприц предназначен для выполнения подкожных инъекций инсулина.

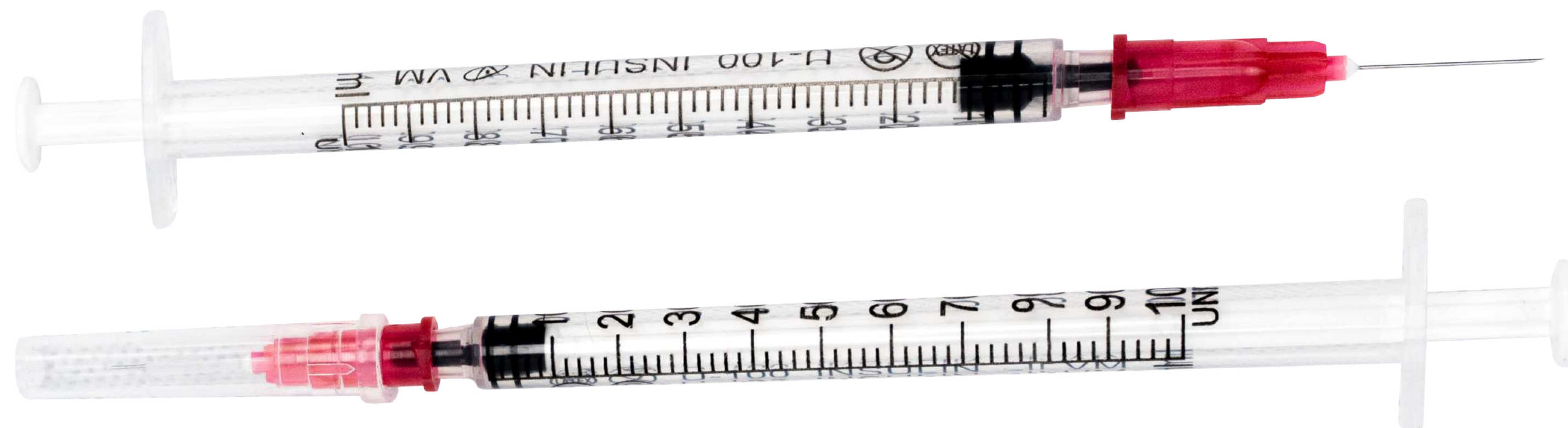

Возможные модели:

- с интегрированной иглой (с цветовой кодировкой колпачка)
 - U-40 – 40 единиц инсулина в 1 мл (красный колпачок)
 - U-100 – 100 единиц инсулина в 0,3/0,5/1 мл (оранжевый колпачок)
- с надетой иглой (без цветовой кодировки колпачка)

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Надежная фиксация иглы в модели с надетой иглой

Короткая, максимально тонкая игла (до 31G) наряду с тонкой стенкой и трехгранной заточкой острия иглы

Отсутствие аллергии

Безлатексная технология производства

Сохранность свойств инсулина

Материалы шприца совместимы с инсулином

Удобство реализации шприцов №10

- ✓ нет ошибок при отсчете
- ✓ сохранность при транспортировке и удобство хранения в домашней аптечке
- фабричная фасовка по 10 штук
- компактная упаковка в полибеге
- 2-й колпачок сохраняет стерильность

Отсутствие обратного хода лекарства во время инъекции

Два кольца уплотнителя поршня гарантируют герметичность

Прецизионность дозировки и полнота введения препарата инсулина

- конструкция шприца позволяет исключить вероятность потери препарата
- интеграция иглы снижает объем мертвого пространства и сокращает количество манипуляций при подготовке к инъекции
- специальный выступ на уплотнителе поршня шприца с надетой иглой обеспечивает выведение инсулина из мертвого пространства
- удобная, нестираемая градуировка

Плавное введение препарата, снижение дискомфорта

Точная совместимость уплотнителя поршня и цилиндра, одновременно с идеально гладкой внутренней поверхностью цилиндра

VM® ИГЛЫ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК

Иглы для шприц-ручек предназначены для подкожного введения инсулина посредством автоматических шприц-ручек.

ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ:



иглы
для шприц-ручек



безопасные иглы
для шприц-ручек

* Компания Vogt Medical не производит шприц-ручки

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Использование шприц-ручки снижает психологическое напряжение от ежедневных инъекций инсулина

Не требует специальной подготовки к манипуляции
Инъекция может быть проведена где угодно

Универсальна для всех шприц-ручек

Иглы совместимы со всеми марками инсулиновых шприц-ручек (Тип А)

Скорейшее заживление при минимальном травмировании тканей и без риска липодистрофии

Сверхтонкая игла, электрическая полировка иглы, технология тонкостенных игл

Отсутствие риска травмы и заражения во время использования и утилизации

Безопасные иглы для шприц-ручек автоматически блокируются после инъекции

Отсутствие аллергии

Безлатексная технология производства

VM® ТУБЕРКУЛИНОВЫЕ ШПРИЦЫ

Туберкулиновый шприц – 3-х компонентный шприц предназначен для:

- внутрикожного введения вакцины БЦЖ
- внутрикожной пробы Манту
- внутрикожных аллергологических проб

КОННЕКТОР: Луер слип

ИГЛА: надетая



ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Наиболее подходящий для введения туберкулина

Не требует специальной подготовки к манипуляции
Инъекция может быть проведена где угодно

Оптимальная игла для равномерного образования папулы

Внутрикожный срез иглы 26G специально
для введения препарата между слоями кожи

Плавное введение препарата, снижение дискомфорта и болевых ощущений во время инъекции

Точная совместимость уплотнителя и цилиндра,
одновременно с идеально гладкой внутренней
поверхностью цилиндра

Отсутствие аллергии

Безлатексная технология
производства

Прецизионность дозировки и гарантия полноты введения лекарственного препарата

Специальная конструкция шприца:

- туберкулиновая градуировка в 0,02 мл
- герметичный уплотнитель поршня особой формы с 2 кольцами и выступом
- прозрачный цилиндр шприца с хорошо читаемой, нестирающейся маркировкой

VM® СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ

Инфузионные системы предназначены для внутривенного вливания инфузионных растворов из полимерных контейнеров или стеклянных флаконов

Материал:	▸ ПВХ с фталатами ▸ ПВХ с TOTM (без фталатов) ▸ ТПЕ (без ПВХ и фталатов)	Игла:	▸ Нет ▸ Есть (0,8х40 мм)
Размер капельной камеры:	S/M/L	Тип коннектора:	▸ Луер Слип ▸ Луер Лок ▸ Ротируемый Луер Лок
Количество капель в 1 мл:	20/60	Шип:	▸ Пластиковый ▸ Металлический (две иглы/игла в игле)
Длина трубки:	150/180/200/300 см	Порт для болюсных инъекций:	▸ Нет ▸ Инъекционный порт: стандартный/Y-порт/безыгольный Y-порт
Упаковка:	блистер/полибег		
Регулятор скорости потока:	▸ Роликовый зажим (M/L) ▸ Барабанный	Опционно:	▸ Антибактериальный фильтр 0,2 мкм ▸ Держатель трубки ▸ Защита от УФ

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Надежная очистка вливаемых препаратов

Фильтр капельной камеры размером ячейки 15 мкм не пропускает микро-частицы стекла и резины

Возможность регулировки скорости потока в мл

Наличие барабанного регулятора позволяет установить поток в диапазоне 5-250 мл/час

Отсутствие аллергий

Произведены без натурального латекса

Применимы с устройствами для подогрева вливаемых растворов

Система № 1311153:
длина трубки 300 см

Прецизионное дозирование в кардиологии и неонатологии и пр.

Системы с микрокапельнообразующим элементом (60 капель = 1 мл $\pm$ 0,1 мл)

Легкая перфорация резиновой пробки флакона/мембраны пластикового пакета

Наличие металлического или пластикового шипа

Надежная защита от бактерий

Стекловолоконная мембрана с порами 0,3 мкм воздухопроводного устройства обеспечивает очистку воздуха + 5% выше стандарта + опция дополнительного фильтра 0,2 мкм, который в т.ч. удаляет пузырьки воздуха

Сохранение химических свойств вливаемых препаратов

Системы из ТПЕ не вступают в реакции с растворами и агрессивными препаратами; + специальная окраска системы компонентами японского производства защищает светочувствительные препараты

Широкий выбор возможностей подключения систем

Коннекторы Луер Лок и Луер Слип совместимы с иглами и внутривенными канюлями, а также с трехходовыми кранами ЦВК и удлинительными линиями


VM® СИСТЕМЫ ТРАНСФУЗИОННЫЕ

Системы предназначены для гравитационного внутривенного вливания компонентов и препаратов крови, а также кровезаменителей из одноразовых контейнеров.

Материал: ▶ ПВХ с фталатами
▶ ПВХ с TOTM (без фталатов)

Длина трубки: ▶ 150 см
▶ 250 см

Игла: ▶ нет
▶ есть (1,2х40 мм)

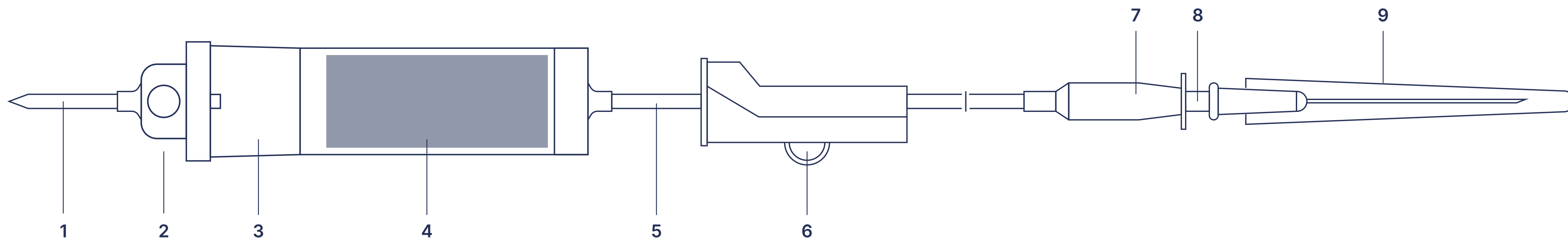

(1) Пластиковый шип с крышкой
(2) Воздухозаборник
(3) Капельная камера

(4) Фильтр капельной камеры
(5) Гибкая трубка
(6) Регулятор скорости потока

(7) Инъекционный порт
(8) Коннектор Луер Слип или Луер Лок
(9) Игла с крышкой

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Сохранение целостности форменных элементов крови

Фильтр капельной камеры размером ячейки 200 мкм не препятствует прохождению форменных элементов крови

Надежная очистка вливаемых препаратов

Фильтр капельной камеры не пропускает склеившиеся клетки крови, которые образуются при хранении (конгломераты)

Удобство перфорации штуцера контейнеров крови и пластиковых флаконов и пакетов

Оснащены пластиковым шипом, изготовленным по технологии «острие карандаша»

Отсутствие аллергии

Произведены без натурального латекса

Сохранение свойств вливаемого препарата и отсутствие пирогенных реакций

Системы из ПВХ с TOTM не содержат фталатов и не вступают в реакции с препаратами крови

Удобство проведения болюсных инъекций во время трансфузии

Наличие инъекционного порта или Y-порта

Надежная защита препаратов крови от бактерий

Стекловолоконная мембрана с порами 0,3 мкм воздухопроводного устройства обеспечивает очистку воздуха +5% выше стандарта

Универсальное соединение Луер Слип или Луер Лок с канюлями внутривенными и всеми марками ЦВК


Подходит ко всем маркам внутривенных катетеров, специализированных для трансфузии (G):
14 270 мл/мин, 16 180 мл/мин, 17 125 мл/мин, 18 95 мл/мин

VM® ПЕРФУЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ «БАБОЧКА»

Набор перфузионный предназначен для разового внутривенного вливания лекарственных препаратов и для забора образцов крови на анализ.

ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ:

- Набор перфузионный одноразовый
- Набор перфузионный одноразовый с безопасным механизмом
- Набор перфузионный одноразовый для забора крови
- Набор перфузионный одноразовый для забора крови с безопасным механизмом

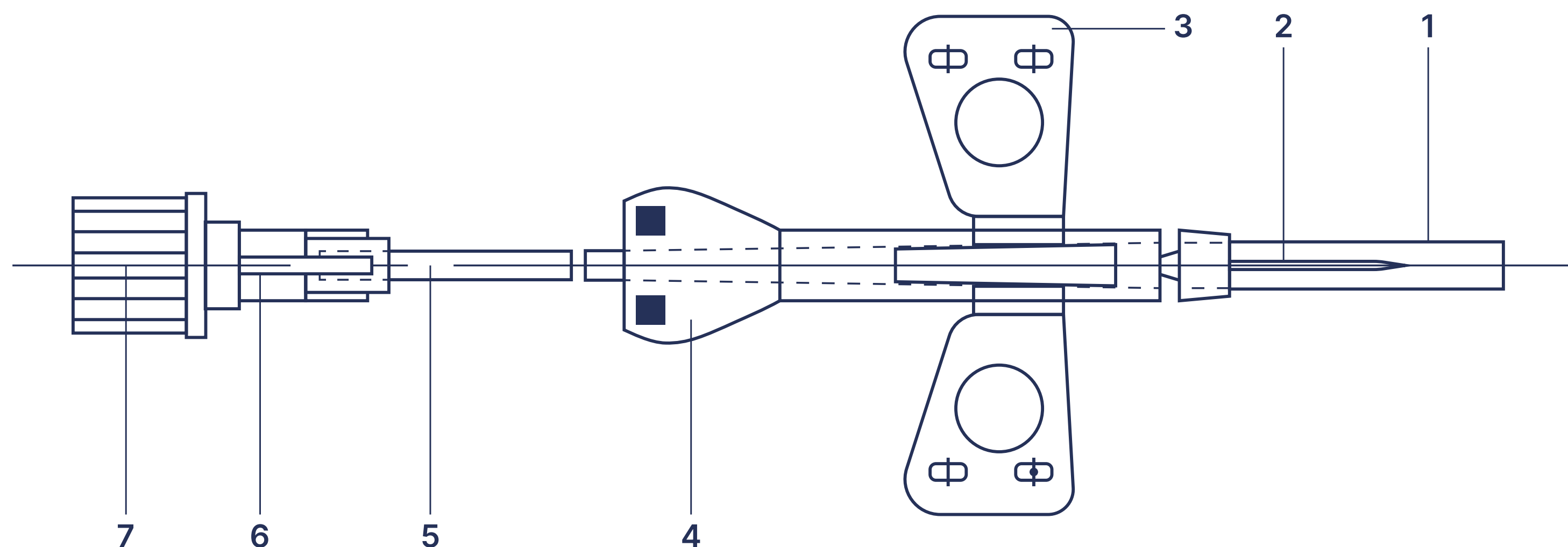

- (1) Защитный колпачок
- (2) Игла
- (3) Крылышки
- (4) Безопасный механизм
- (5) Гибкая удлинительная трубка
- (6) Коннектор
- (7) Колпачок Луер Лок

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Удобный захват при проведении венепункции и надежная фиксация

Наличие рельефных крылышек

Сохранность химических свойств препаратов

Имеются модели без фталатов

Отсутствие аллергий

Произведены без натурального латекса

Безопасное введение лекарственных препаратов

Наличие универсального коннектора Луер Лок с надежным винтовым креплением

Широкий выбор возможностей подключения других устройств

Коннекторы Луер Лок и Луер Слип

Возможность вакуумного забора образцов крови

Наличие специального порта для подключения к вакуумным системам

Безопасность медицинского персонала, проводящего манипуляцию и утилизацию

Модели с безопасным механизмом позволяют обезопасить иглу после использования

Снижение дискомфорта и болевых ощущений во время введения иглы

Игла 19-27G из высококачественной нержавеющей стали и с трехгранной заточкой острия иглы

Оптимальная альтернатива инъекционной игле при введении венепункции

Помимо самой иглы специального дизайна, устройства располагают рядом с доп. компонентами, облегчающими проведение инфузии и забора крови

Возможность проводить манипуляции и введения вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены

Гибкая, устойчивая к изломам болюсная удлиннительная трубка длиной 30 см

VM® ВНУТРИВЕННЫЕ КАНЮЛИ


Внутривенные канюли предназначены для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной инфузионной терапии.

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ:

- С портом и крылышками
- Без порта с крылышками
- Без порта и крылышек
- Без порта с маленькими крылышками

БЕЗОПАСНЫЕ МОДЕЛИ:

- С портом и крылышками с безопасным механизмом
- Без порта с крылышками с безопасным механизмом
- Без порта и крылышек с безопасным механизмом

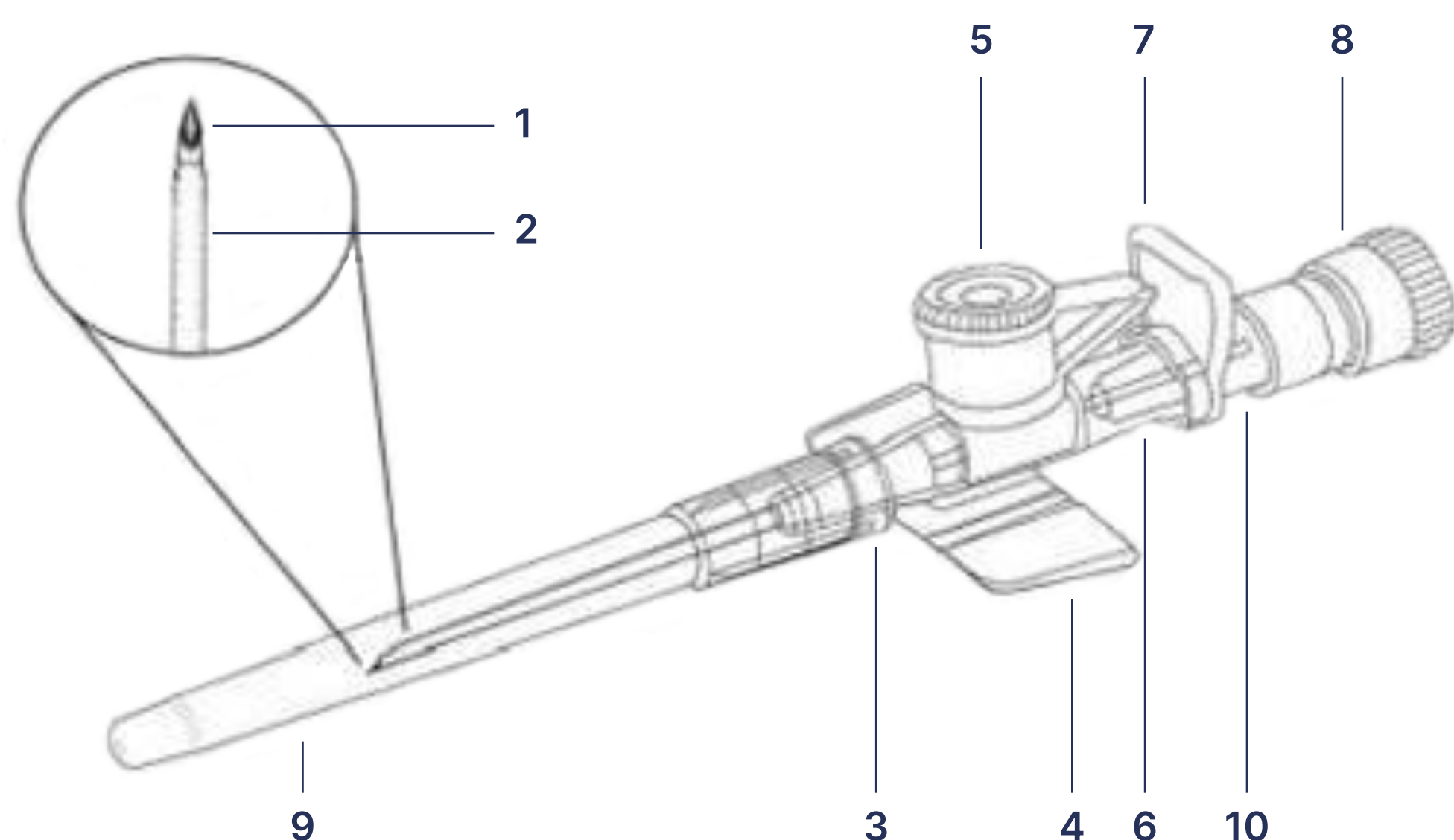

Канюля (катетер) внутривенная с портом и крылышками:

- (1) Проводниковая игла
- (2) Трубка катетера (канюли)
- (3) Канюля катетера
- (4) Крылья
- (5) Порт с крышкой
- (6) Канюля иглы
- (7) Рукоятка проводниковой иглы
- (8) Колпачок Луер Лок
- (9) Защитный колпачок
- (10) Камера визуализации (камера обратного тока)

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Сохранность химических свойств препаратов и отсутствие аллергии

Безлатексная технология изготовления, без фталатов

Снижение дискомфорта и болевых ощущений во время введения канюли

Игла 14-26 G с обратным срезом острия иглы

Возможность болюсных инъекций

В моделях с портом

Возможность контроля положения канюли в вене

Наличие от 2 до 6 рентгенконтрастных полос в трубке катетера

Простота открытия и закрытия порта одним пальцем: освобождает вторую руку, снижает вероятность контаминации порта

Некоторые модели с портом оснащены полуавтоматической крышкой flip-flop

Удобный захват и правильный угол введения при проведении катетеризации, наряду с надежной фиксацией

Наличие рельефных крылышек; дополнительное упорное устройство у педиатрических канюль

Возможность визуального контроля хода постановки канюли

Камера обратного тока позволяет отслеживать ход крови даже при минимальных показателях давления

Успешная постановка благодаря сохранности заводских параметров

Индивидуальная упаковка - жесткий блистер: точность настройки расстояний механизмов и сохранность компонентов

Возможность длительной инфузионной терапии


Катетеры тромборезистентны и обладают отличной проникающей способностью.
Рекомендуемое время в вене в зависимости от материала:
(1) Полиуретан - до 72 часов, (2) Тефлон - 24-48 часов

VM® МОЧЕПРИЕМНИКИ


Предназначены для сбора мочи в стационарных или амбулаторных условиях:

- для взрослых - через катетер из мочевого пузыря
- детский (педиатрический) - для сбора мочи у грудных детей для последующего анализа


ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ: педиатрические (100/200 мл); ножные (500/750 мл); прикроватные (1000/2000 мл)

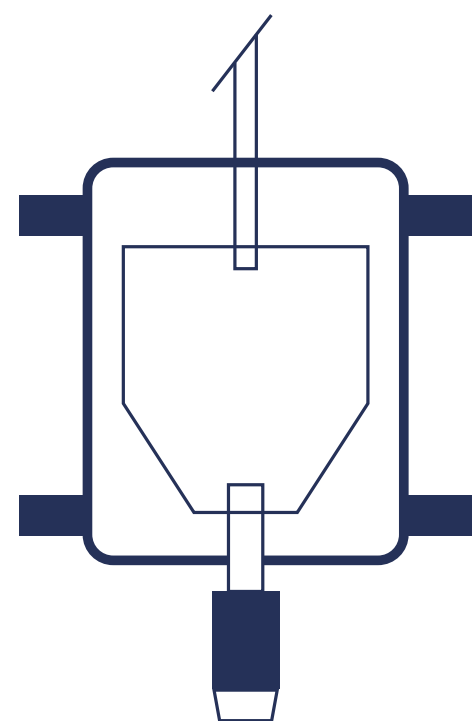


Ножной с винтовым
сливным краном

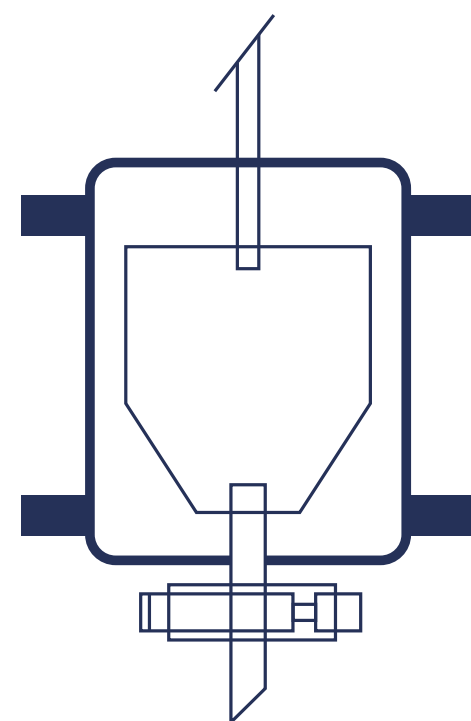


Ножной
с крестообразным
сливным краном

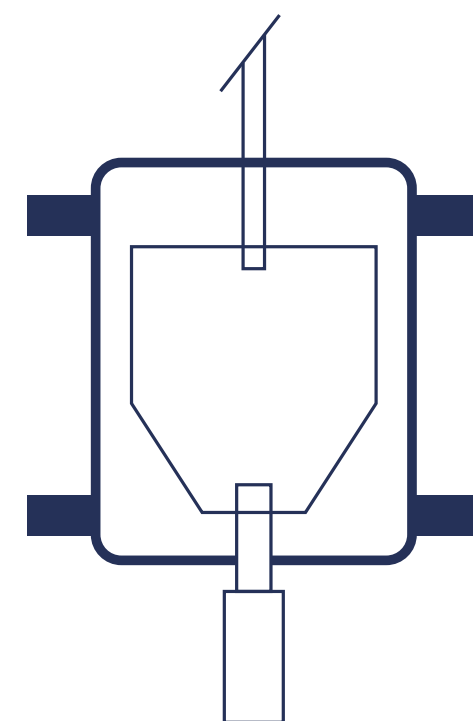


Ножной с прямым
сливным краном

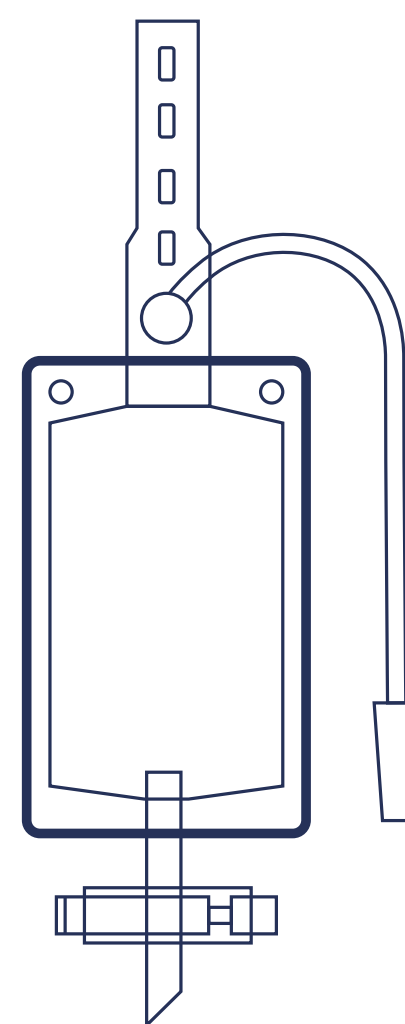

Прикроватный с крестообразным
сливным краном
со встроенным креплением

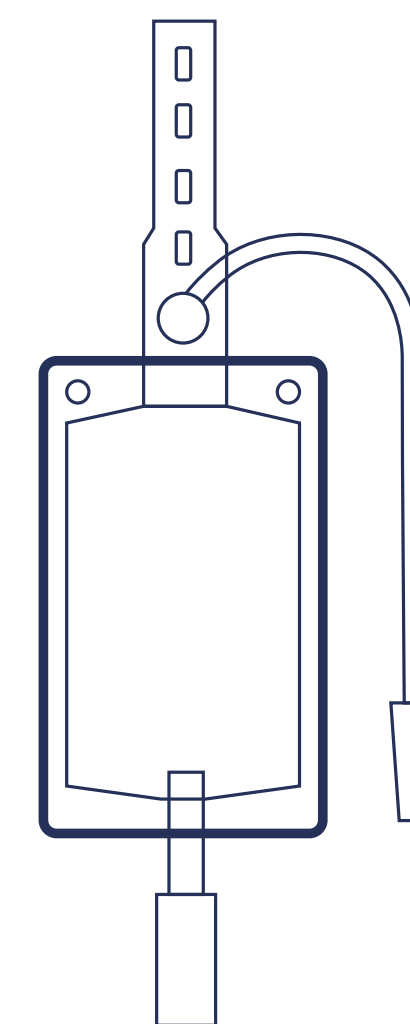

Прикроватный с прямым
сливным краном
со встроенным креплением

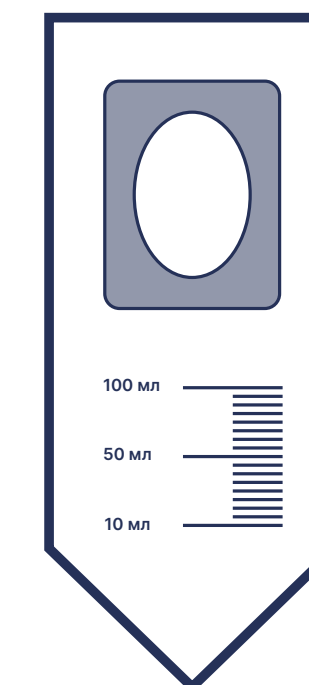

Педиатрические,
универсальные

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

**Простота отбора проб мочи на анализ
и опорожнения мочеприемника
по мере необходимости**

Наличие различных механизмов слива

**Надежное подключение
к катетеру Фолея**

Подходит к катетерам
любых производителей

Удобный контроль за содержимым

Изготовлены из полупрозрачного
материала с маркировкой шкалы

**Беспрепятственный отвод
содержимого**

Устойчивая к перегибам
отводная трубка

**Легкая фиксация педиатрического
мочеприемника без аллергий**

Имеют самоклеящуюся гипоаллергенную
основу для фиксации к промежности

**Педиатрический мочеприемник
подходит и девочкам, и мальчикам**

Универсальное отверстие
для сбора мочи

**Сохранение стерильности системы
(мочеприемник + катетер)**

Универсальный ступенчатый коннектор позволяе
надежно подключиться к мочевому катетеру

**Возможность точно подобрать необходимую
модель, в зависимости от клинического случая**

Варианты сливных кранов (винтовой, пул-пуш,
крестовидный); прикроватные или ножные

Возможность сохранять активный образ жизни

Ножной мочеприемник комплектуется безлатексными
эластичными лентами со специальными
застежками и надежно крепится к ноге


**Значительно снижен риск развития
восходящей инфекции**

Мочеприемники для взрослых оснащены специальным
невозвратным клапаном, который предотвращает
обратный ток мочи

VM® КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ

Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые и латексные с силиконовым покрытием 2-х и 3-х ходовые предназначены для длительного дренирования и промывания мочевого пузыря, а также введения препаратов.

ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ: 100% силикон; латексный с силиконовым покрытием

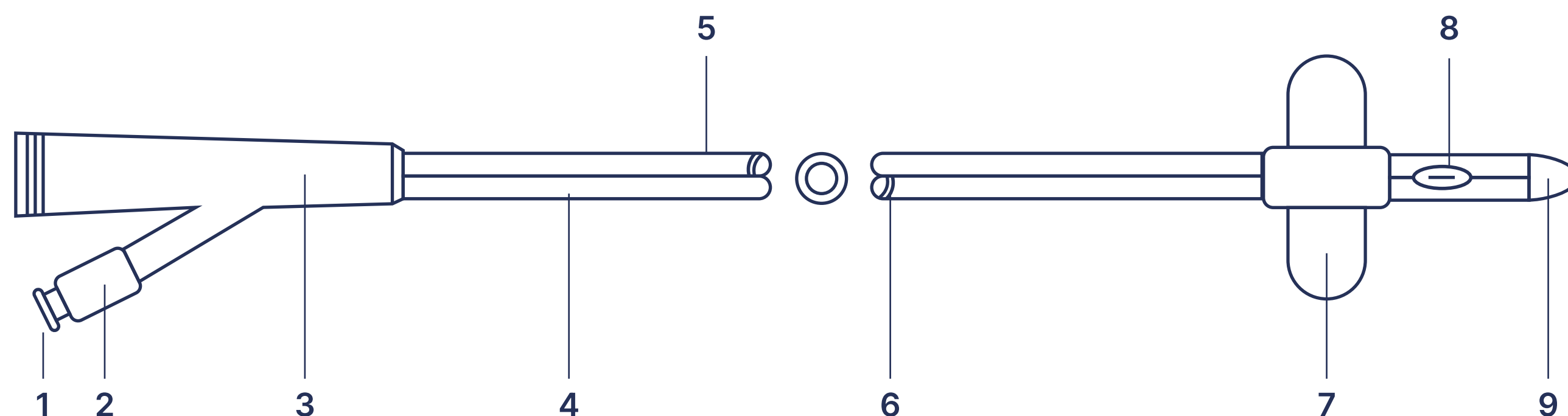

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| (1) Невозвратный клапан | (6) Рентгеноконтрастная полоса |
| (2) Цветовая кодировка | (7) Баллон |
| (3) Дренажная воронка | (8) Глазки |
| (4) Трубка | (9) Конический наконечник |
| (5) Боковой просвет | |



ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА исходя из ПРЕИМУЩЕСТВ

Простота подбора необходимой модели

Широкий ассортимент
размеров катетеров

Эффективный отток мочи

Отток начинается
уже в момент установки

Долгосрочная катетеризация

Латексные – до 7 суток;
силиконовые – до 28 суток

Надежная фиксация катетера в мочевом пузыре

2-х ходовые катетеры имеют один канал
для дренирования, а через второй канал -
баллон наполняют стерильным раствором

Возможность промывания мочевого пузыря и введения лекарственных препаратов

3-х ходовые катетеры оснащены
дополнительным каналом

Удобство контроля положения катетера

В стенку трубки силиконовых
катетеров интегрирована
рентген-контрастная полоса

Сохранение формы педиатрического катетера при его введении

Катетеры размерами 6-10 Fr снабжены
армирующими проводами из нейлона

Комфорт и безопасность для пациента

Силиконовое покрытие облегчает
установку латексных катетеров,
снижает риск возникновения аллергии

Силиконовые катетеры произведены
из материала, не позволяющего солям
откладываться на поверхности катетера,
биосовместимы



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВО ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ


11 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
-Я С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

МОСКОВСКАЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ

**ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ**

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»

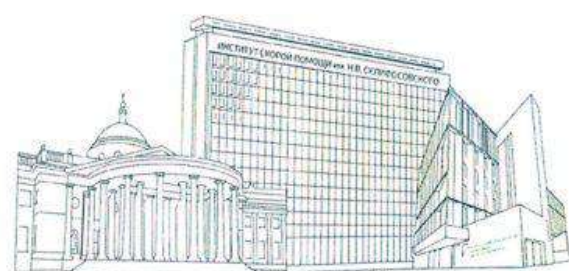

21-22 мая 2024г.
МОСКВА

Президент МОО ОТ
академик РАН
профессор

М.Ш. Хубутия



нейрошкола объединения
нейроанестезиологов и
нейрореаниматологов

КЛУБ РУНЕЙРО

ДИПЛОМ

награждается компания



За поддержку научно-практической конференции
**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕЙРОАНЕСТЕЗИОЛОГИИ
И НЕЙРОРЕАНИМАТОЛОГИИ**

С.С. Петриков
Член-корр. РАН, д.м.н.,
профессор, президент
МОО «Объединение
нейроанестезиологов и
нейрореаниматологов»

А.В. Щеголев
Главный анестезиолог-
реаниматолог Министерства
Обороны РФ, д.м.н.

А.А. Белкин
Профессор, д.м.н.

А.А. Солодов
д.м.н.

19 ЯНВАРЯ 2024



6-й СЪЕЗД ВРАЧЕЙ
НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНЫ

19-20 ОКТЯБРЯ
2023 г.
МОСКВА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ
ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ,

ПРИУРОЧЕННЫЙ К 100-ЛЕТИЮ
НИИ СП ИМ. Н.В. СКЛИФОВСКОГО ДЗМ

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

УЧАСТНИК ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»

19-20 ОКТЯБРЯ 2023 г.
МОСКВА

Президент МОО НПО ВМ
президент НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского
акад. РАН

М.Ш. Хубутия



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ГОРИЗОНТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЕ – ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ**

АСТРАХАНЬ

26-28 СЕНТЯБРЯ 2024 г.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»



ПРЕЗИДЕНТ МОО НПО ВМ
ПРЕЗИДЕНТ НИИ СП
ИМ. Н.В. СКЛИФОВСКОГО
АКАДЕМИК РАН
ПРОФЕССОР

М.Ш. ХУБУТИЯ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВО ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ



10 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
-Я С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

**МОСКОВСКАЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ**

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»

Президент МОО ОТ
академик РАН
профессор

М.Ш. Хубутия



18 ноября 2022 г.
МОСКВА

Контактные данные

 105066, г. Москва,
ул. Старая Басманная, дом 36,
строение 2, офис 316

 **+7 (495) 109-35-97**

 153012, г. Иваново,
ул. 10 Августа, дом 43, офис 406

 **+7 (4932) 58-19-63**



info@distributor-company.ru



Наш сайт:
distributor-company.ru